


TWIST™ DIA for Zirconia

Optimaler Glanz in 3 Schritten

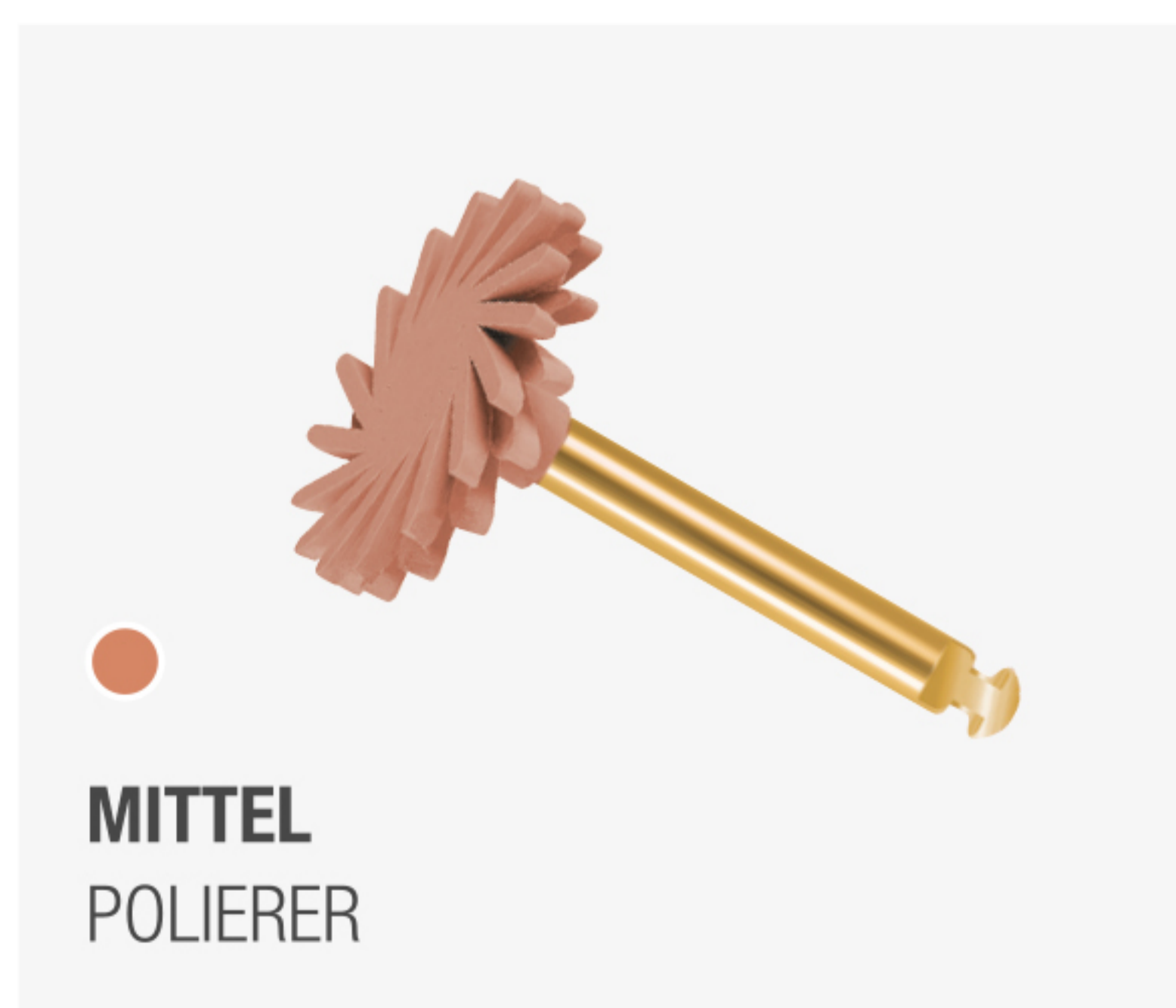

DAS TWIST KONZEPT – DIE VEREINFACHUNG DER POLITUR

EIN INSTRUMENT FÜR JEDE ZAHNFLÄCHE

Die Lamellen passen sich der Oberflächenstruktur an. Somit ist die Benutzung verschiedener Geometrien nicht mehr zwingend notwendig.

ERHALT DER OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Im Vergleich zu herkömmlichen Poliersystemen wird die vorher ausgearbeitete Oberfläche nicht modifiziert. Die ursprüngliche Struktur bleibt erhalten.

AUSSERORDENTLICHE LANGLEBIGKEIT

Die geringe Abnutzung der Polierlamellen während der Bearbeitung führt zu einer für Polierinstrumente bisher einzigartigen Langlebigkeit.

REDUZIERTER HITZENTWICKLUNG


Die offene Form der TWIST Polierer sorgt für stetige Luftzufuhr und reduziert die auftretende Reibungswärme. Daraus resultiert eine geringere Hitzeentwicklung und eine materialschonende Politur.

GLÄNZENDE POLIERERGEBNISSE

Durch die Lamellenform wird die Kontaktfläche zum bearbeiteten Material im Vergleich zu traditionellen Poliersystemen deutlich vergrößert und somit der Politurprozess effizienter. Hervorragende Polierergergebnisse in kürzester Zeit sind das Ergebnis.

INTUITIVE ANWENDUNG

Die Anwendung von TWIST Polierern ist intuitiv. Hervorragende Ergebnisse werden bereits bei der ersten Anwendung erzielt.

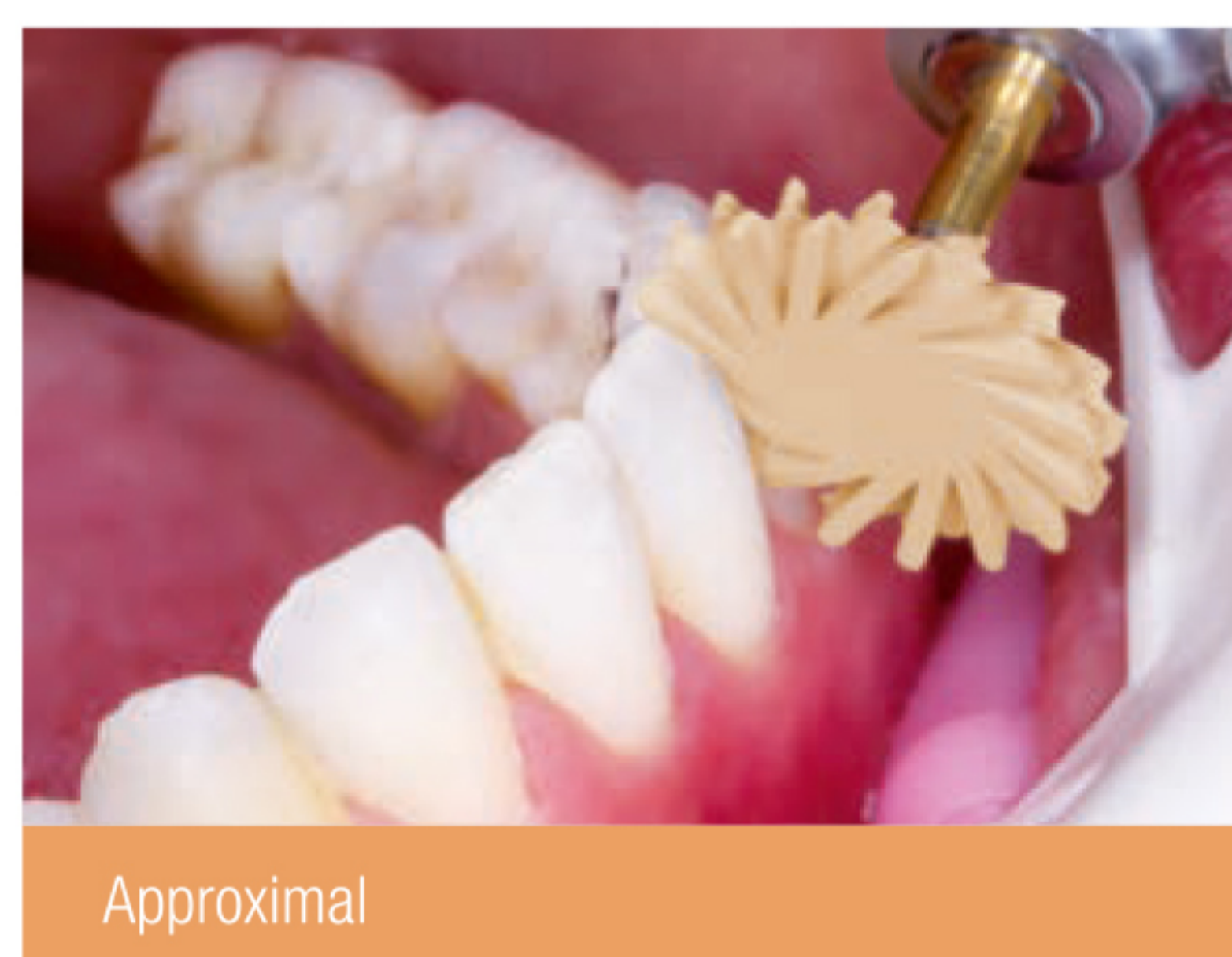

EMPFOHLENE UND MAXIMALE DREHZAHLEN

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 10.000 U/min für Grob/Mittel/Fein

Maximale Drehzahl: 20.000 U/min

TWIST™ DIA for Zirconia

Polier- und Finalisierungssystem für Zirkonoxid

#1302-IP GROB 14mm (10 St.)

#1305-IP FEIN 14mm (10 St.)

#1303-IP MITTEL 14mm (10 St.)

#1301-IP Intro Kit 14mm (3 St.)

KOMPOSITE POLIEREN MIT TWIST™ DIA

Die innovative Form mit flexiblen Polierspiralen bietet dem Zahnarzt vielfältige Anwendungsvorteile für exzellente Polierergergebnisse. Mehr erfahren: kuraraynoritake.eu/twist-dia

Die Spezifikationen und das Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die gedruckte Farbe kann geringfügig von der tatsächlichen Farbe abweichen.

Vertrieb durch:

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Deutschland,
+49 (0)69-30 535 835, dental.de@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu