

Futurabond® M+

UNIVERSAL-ADHÄSIV



Futurabond® M+

JEDER TROPFEN EIN GEWINN

Ein Bonding, das in jeder Situation das richtige ist:

Futurabond M+ vereint in nur einer Flasche alles, was ein Zahnarzt von einem Adhäsiv erwartet und wofür sonst verschiedenste Präparate benötigt werden. Es ermöglicht tatsächlich universelles, schnelles und qualitativ hochwertiges Arbeiten. Wissenschaftliche Messungen zeigen sehr gute Haftwerte von Futurabond M+ an Schmelz und Dentin und belegen damit höchste Zuverlässigkeit in dem breitesten Anwendungsgebiet eines Adhäsivs. Aber auch an diversen anderen Materialien wie Zirkoniumoxid-Substraten werden dem universellen Einflaschen-Adhäsiv bereits exzellente Haftwerte attestiert. Verlangten bisher spezielle Indikationen

wie beispielsweise die intraorale Reparatur von Vollkeramikrestorationen den Einsatz eines zusätzlichen Primers, werden allein mit Futurabond M+ jetzt nachweislich ebenbürtige oder sogar bessere Ergebnisse erzielt.

Als Abrundung der universellen Einsetzbarkeit gestattet Futurabond M+ jedem Anwender frei zu entscheiden, ob er die Zahnhartsubstanz vorab mit Phosphorsäure konditionieren möchte oder nicht. Denn dank einer neu eingesetzten Monomertechnologie ist ein Überätzen des Dentins ausgeschlossen, postoperative Sensitivitäten können so sicher verhindert werden.

Freie Wahl der Ätztechnik:

- Self-Etch ✓
- Selective-Etch ✓
- Total-Etch ✓

Für **direkte und indirekte** Restaurationen mit allen licht-, selbst- und dualhärtenden Composites auf Methacrylatbasis.*

Optimale Benetzungseigenschaften sorgen für **sichere Versiegelung** der Dentintubuli – keine postoperativen Sensitivitäten.

Für **intraorale Reparaturen** von Füllungen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestorationen.

In einer Schicht aufzutragen – schnelles Arbeiten in nur **35 Sekunden**.

Genügend Inhalt für mehr als **250 Anwendungen**.




* Bei selbst- und dualhärtenden Composites in Verbindung mit Futurabond M+ DCA (Aktivator für Dualhärtung)


Futurabond® M+

FLEXIBEL UND ZUVERLÄSSIG

Direkte Restauration

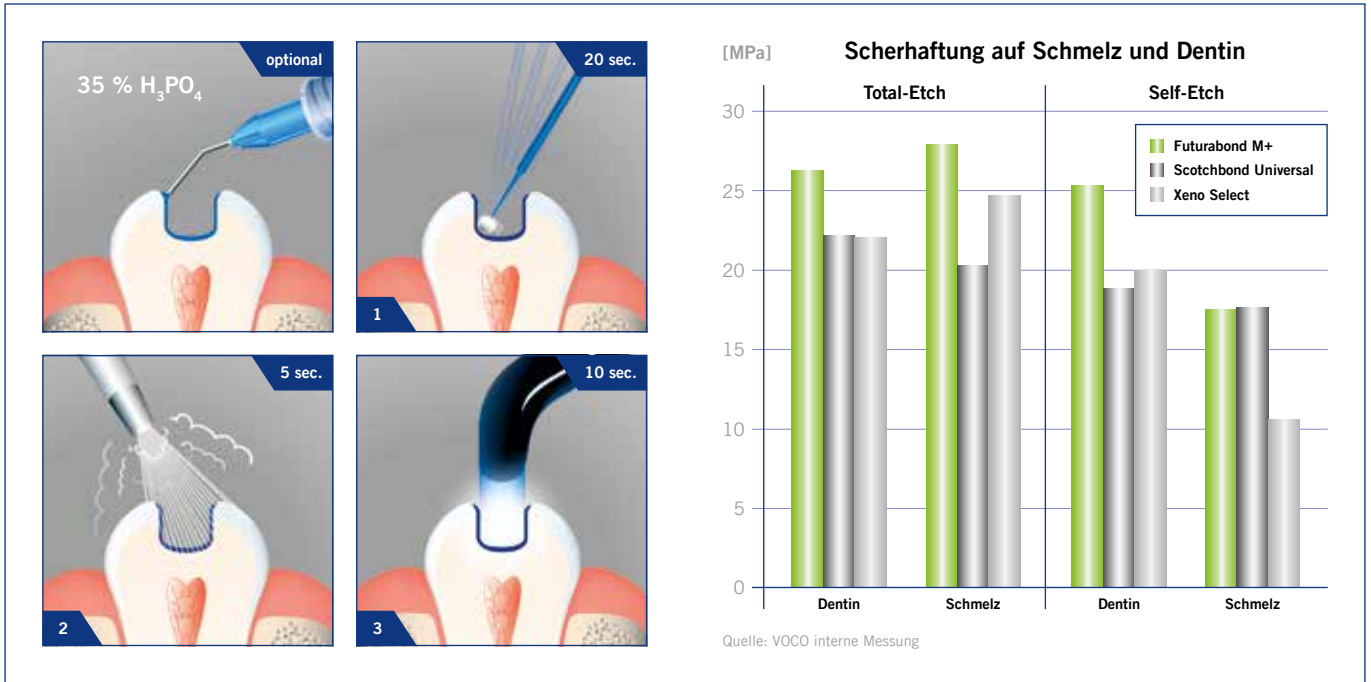

Reparatur von Vollkeramikrestaurationen

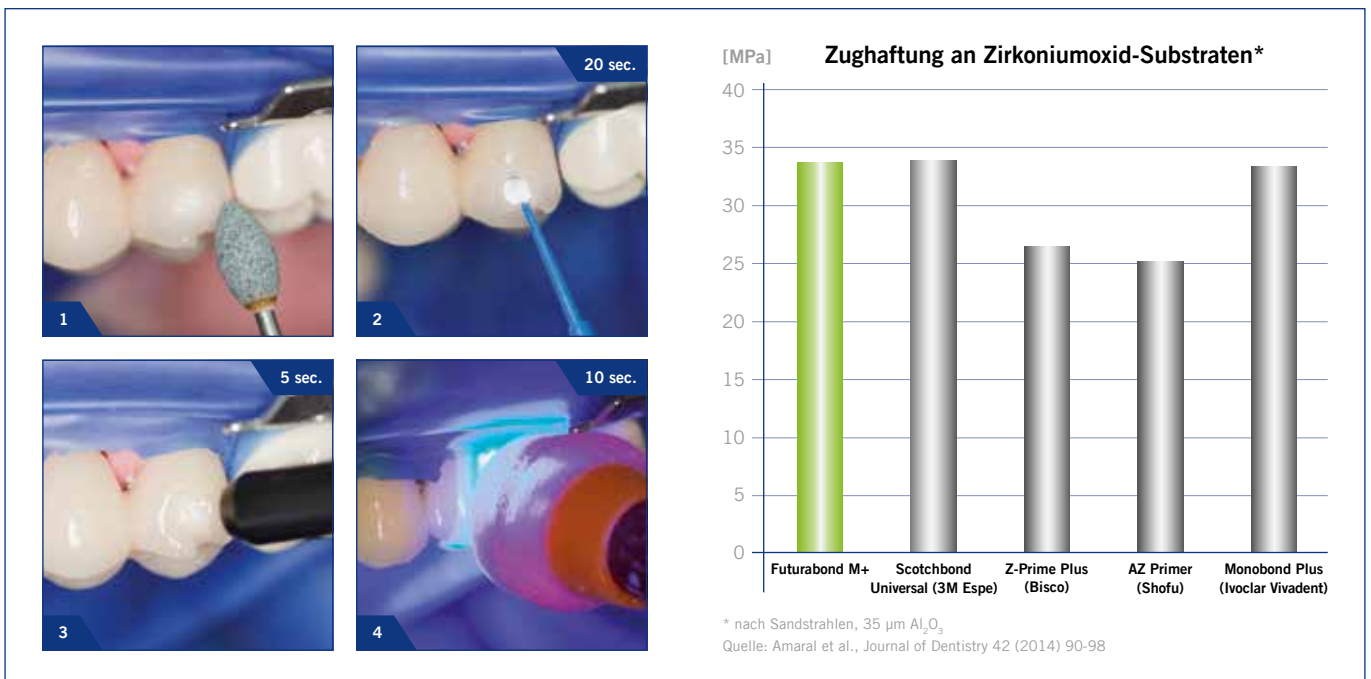

Futurabond® M+

UNIVERSAL-ADHÄSIV

Indikationen

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis

Intraorale Reparatur von Füllungen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestaurationen ohne zusätzlichen Primer

Behandlung überempfindlicher Zahnhälse

Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen

Versiegelung von Kavitäten vor Amalgamrestaurationen und vor der temporären Befestigung

In Verbindung mit Futurabond® M+ DCA (Aktivator für Dualhärtung)

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen selbst- oder dualhärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis

Befestigung von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Befestigungscomposites

Vorteile

- Mit und ohne Phosphorsäure-Ätzschritt einsetzbar
- Hervorragend geeignet für direkte und indirekte Restaurationen
- Haftet sicher an diversen Materialien wie Metallen, Zirkon- und Aluminiumoxid sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer
- In einer Schicht aufzutragen – schnelles Arbeiten in nur 35 Sekunden

Handelsformen

- | | |
|----------|---|
| REF 1515 | Flasche 5 ml, Zubehör |
| REF 1516 | Flasche 3 × 5 ml |
| REF 1518 | Futurabond M+ DCA – Flasche 2 ml |
| REF 2246 | Endo Tim, Applikationspinsel, zur Anwendung im Wurzelkanal, 50 Stk. |
| REF 2247 | Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk. |
| REF 2315 | Anmischpaletten, 20 Stk. |



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.de

VOCO-Kundenservice
Tel.: +49 (0) 4721-719-1111
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Zu beziehen durch: