

Allgemeine Informationen zur KaVo uniQa

1. Mit welchen Optionen kann die KaVo uniQa ausgestattet werden?

Die KaVo uniQa ist die Einheit mit der höchsten Flexibilität an Ausstattungsmöglichkeiten im KaVo Behandlungseinheiten-Portfolio.

Neben der Möglichkeit alle vier Tischvarianten – TM/T/S/Cart – auswählen zu können, bietet sie außerdem zahlreiche Zusatzoptionen, wie die freie Konfiguration der Instrumentenbestückung, die integrierte Endodontie- und Chirurgie-Funktion, unterschiedliche Wasserver- und Wasserentsorgungssysteme, eine Vielzahl an Polster- und Lackfarben und vieles mehr. Eine genaue Übersicht kann der Preisliste oder dem Webkonfigurator entnommen werden.

Trotz der hohen Vielfalt an Varianten, gibt es zum Zeitpunkt der Markteinführung allerdings auch Optionen, die aktuell noch nicht mit der KaVo uniQa angeboten werden. Diese sind:

- RELAXline Polster
- Kombination der KaVo uniQa mit der Centro Säule
- COMFORT Rückenlehne
- R/L schwenkbares Assistenzelement

2. Wofür steht der Produktname „KaVo uniQa“?

Die KaVo uniQa als erste Behandlungseinheit der neuen KaVo Generation ist ein selbstbewusstes Statement von KaVo. Sie ist Sinnbild für die bewährte KaVo Qualität und vereint intelligente Features mit einem herausragenden Design. Sie verbindet Innovationsdenken mit langjähriger Erfahrung und Nähe zum Kunden mit all seinen Anforderungen an einfache Abläufe und beste Behandlungsergebnisse. Die neue Behandlungseinheit ist einzigartig und State of the Art in der Entwicklung dentaler Behandlungseinheiten: sportlich-kompaktes Design, top Ergonomie, intuitive Handhabung und individuelle Konfigurierbarkeit für einen erfolgreichen Praxisalltag. Der Produktname KaVo uniQa kombiniert die Einzigartigkeit eines jeden Behandlers mit der Vielseitigkeit einer Behandlungseinheit und der bewährten Qualität von KaVo.

KAVO
UNIQA

Dental excellence becomes unique.

- Verbindet „uniqueness“ mit „(treatment) unit“
- iQ – Intelligente und intuitive Funktionen
- Q – Bewährte KaVo Qualität
- a – KaVo DNA und Anlehnung an die Geschichte der KaVo Namensgebung (Bsp. ESTETICA, SYSTEMATICA...)

3. Welche Schriftart hat das KaVo uniQa Logo?

Beim KaVo uniQa Logo handelt es sich nicht um einen Schriftzug, sondern um eine Grafik. Das heißt, wenn das individuelle uniQa-Branding gezeigt werden soll, dann muss dieses in Form eines Bildes verwendet werden. Für den reinen Produktnamen wird die Schriftart „Pluto“ verwendet.

Arztelement

4. Wie unterscheiden sich der T- und der TM-Tisch?

In Bezug auf das Bedienkonzept unterscheiden sich die beiden Varianten nicht voneinander – beide Tische haben hängende Instrumentenschläuche und können mit den gleichen Optionen ausgestattet werden. Die Unterscheidung der beiden Versionen liegt an der Art der Anbindung und damit in der Handhabung und Ergonomie hinsichtlich der Positionierung.

TM-Tisch



- Anbindung Armsystem in der Mitte des Tisches
- Griff über die gesamte Breite
- Freie Anbindung der Trayablage über einen zusätzlichen Arm

T-Tisch

- Anbindung Armsystem links vom Tisch
- Griff auf der linken Seite und damit im Schwerpunkt
- Feste Anbindung der Trayablage, wodurch eine fortlaufende Brücke zur Assistenz gebildet wird



Diese scheinbar kleinen Unterschiede führen dazu, dass die Positionierbarkeit des T-Tisches deutlich angenehmer ist und dieser dem Nutzer damit einen merklich höheren Bedienkomfort in Bezug auf Ergonomie bietet.

5. Kann die KaVo uniQa mit CONEXIO und KaVo CONNECTbase ausgestattet werden und welche Kameras stehen zur Verfügung?

Die Kavo uniQa bietet sowohl die Möglichkeit die neue, intuitive und vernetzungsunabhängige Variante CONNECTbase als auch das CONEXIO System für den direkten Zugriff auf alle Patientendaten ohne Workflowunterbrechungen zu verwenden. Für beide Systeme stehen die ERGOcam One, die DIAGNOcam 2170 U und die neuen DIAGNOcam Vision Full HD zur Verfügung.

Assistenzelement

6. Besteht bei der KaVo uniQa die Möglichkeit das Assistenzelement mit einer MF-Spritze auszustatten?

Ja, für die KaVo uniQa gibt es auf der Assistenzseite sowohl die Möglichkeit das 3F-Handstück als auch das MF-Handstück auszuwählen.

Gerätekörper


7. Welche Installationspunkte werden abgedeckt?

Durch die neue Formgebung der Abdeckhaube und der Durchgängigkeit zwischen Patientenstuhl und Gerätekörper bietet die KaVo uniQa eine noch höhere Flexibilität bezüglich der vorgegebenen Installationspunkte. Die neue Haube deckt neben den **KaVo** Einheiten die Anschlüsse der folgenden Anbieter ab

- Sirona
- A-dec
- Anthos
- Stern Weber
- Ultradent
- Belmont

Außerdem werden bei den folgenden Anbietern zwar neue Installationspunkte benötigt, die vorherigen Installationspunkte werden aber durch die Basisplatte abgedeckt. Dadurch wird bei der Neuinstallation kein neuer Boden benötigt.

- Mikrona
- Planmeca
- XO

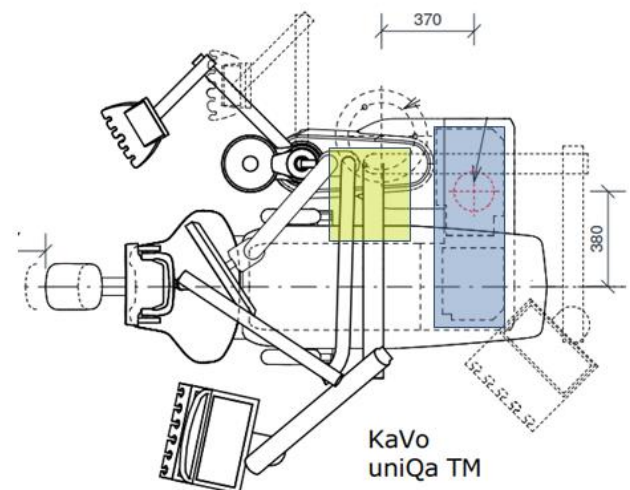

8. Ist das integrierte Hygienecenter in der Grundausstattung enthalten?

Ja, das Hygienecenter ist bei der KaVo uniQa standardmäßig enthalten und kann nicht abgewählt werden. Zusätzlich zum Hygienecenter ist außerdem die KaVo uniQa immer mit dem DEKAmat ausgestattet, wodurch eine automatisierte und effektive Reinigung der Absaugwege gewährleistet wird.

In Kombination mit dem DVGW Wasserblock ist zudem der OXYmat integriert und die OXYGEAL 6 Flasche wird neben der DEKASEPTOL Gel Flasche im Gerätekörper positioniert. Dadurch wird eine mühelose Permanent- und Intensiventkeimung sichergestellt.

9. Muss die KaVo uniQa unbedingt auf dem Boden verschraubt werden oder kann die Aufstellplatte auch geklebt werden?

Die Option der Klebung besteht bei der KaVo uniQa nicht, da nicht gewährleistet werden kann, dass der verwendete Kleber in Kombination mit dem Boden genug Stabilität und Beständigkeit bietet. Eine Kippung der Behandlungseinheit ist somit nicht auszuschließen. Des Weiteren muss gewährleistet sein, dass ein Verschieben der Einheit und daraus resultierende Defekte an Leitungen und Schläuchen ausgeschlossen sind, was nur durch das Verschrauben der Behandlungseinheit sichergestellt werden kann. Die KaVo uniQa muss daher aus normativen Gründen am Boden verschraubt werden.

10. Warum bietet KaVo keinen geeigneten Kleber an?

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Bodenbelägen und der daraus resultierenden Abhängigkeiten des benötigten Klebers zum Befestigen der Behandlungseinheit am Praxisboden, kann nicht gewährleistet werden, dass alle Eventualitäten im Rahmen von internen Tests abgeprüft werden. Zusätzlich spielt neben den individuellen Abhängigkeiten zwischen Behandlungseinheit und Fußboden außerdem die Verbindung zwischen Bodenbelag und Estrich eine große Rolle. Selbst mit einem geeigneten Kleber, der alle Bedingungen bei unterschiedlichen Belägen und Umgebungseinflüssen erfüllt, besteht damit ein Restrisiko und es kann nicht gewährleistet werden, dass die Behandlungseinheit stabil und kippsicher montiert ist.

→ Siehe auch Punkt 10

Patientenstuhl

11. Welche Vorteile bringt es, dass die Armlehne auf der Gerätekörperseite weggeschwenkt werden kann?

Grundsätzlich kann bei der Montage der KaVo uniQa entschieden werden, ob die Armlehne auf der Seite des Gerätekörpers fest montiert oder schwenkbar sein soll.

Gerade für Patienten, die etwas mehr Platz auf dem Stuhl benötigen oder sich schnell eingeengt fühlen, kann es deutlich angenehmer sein, wenn die Armlehne auf beiden Seiten abklappbar ist.