


VITA PROTHETIK LÖSUNGEN

Formenkarte

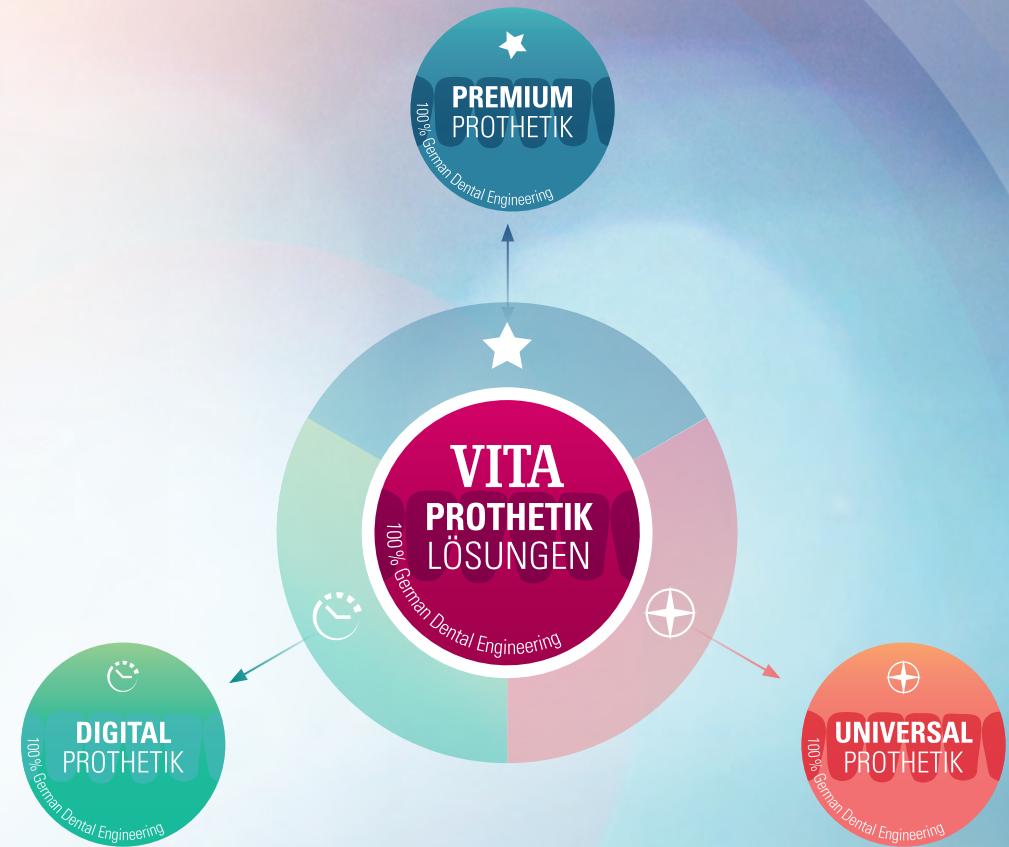

Für beste Dentalprothetik – natürlich, verlässlich, variantenreich.

So einfach geht's – In drei Schritten zur passenden Zahnform!

1.

Wählen Sie die Kategorie/ Zahnlinie

Entscheiden Sie sich nach Fallanforderung und Indikation für eine Kategorie/Zahnlinie.

2.

Wählen Sie die Formengruppe

Wählen Sie passend zur Gesichts-/Kieferform des Patienten die geeignete Formengruppe aus.

3.

Ermitteln Sie die passende Zahnform

Ermitteln Sie auf Grundlage von Eckzahn- und Lachlinie passende Zahnformen.

1. Wählen Sie die passende Kategorie/Zahnlinie

**Lebendiges Form- und
Farbspiel für natürliche
Ergebnisse.**




**Überzeugende Farb- und
Formenvielfalt für alle Fälle.**



**Effiziente CAD/CAM-
Prothetik für mehr
Produktivität.**



> Empfohlene Anterior-/Posteriorkombinationen

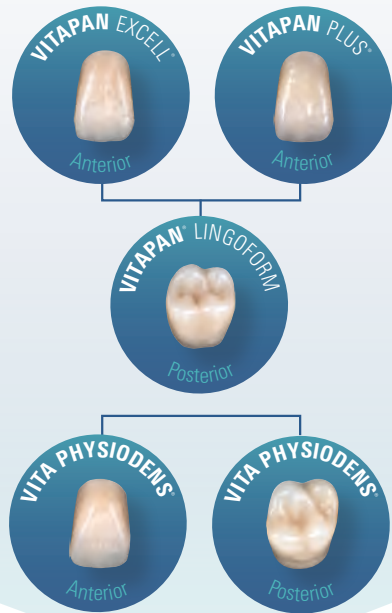


> Empfohlene Indikation(en)*

| | ★ | | | ⊕ | | ☺ | |
|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Anterior | VITAPAN EXCELL | VITAPAN PLUS | VITA PHYSIODENS | VITAPAN | | VITA VIONIC VIGO | VITA VIONIC FRAME |
| Posterior | VITAPAN LINGOFORM | | VITA PHYSIODENS | VITAPAN CUSPIFORM | VITAPAN SYNOFORM | VITA VIONIC VIGO | VITA VIONIC FRAME |
| Totalprothetik | ● | ● | | ● | | ● | ● |
| Teilprothetik | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| Kombinationsprothetik | | | ● | | | | |
| Implantatprothetik | ● | ● | | | | | |
| Gerontoprothetik | | | | | ● | | |


* Dies sind empfohlene Indikationen für die jeweiligen Prothetiklösungen/Prothesenzähne, i.d.R. ist jedoch das gesamte Spektrum der Total-/Teil-/Kombinations- und Implantatprothetik möglich!

2. Wählen Sie die geeignete Formengruppe

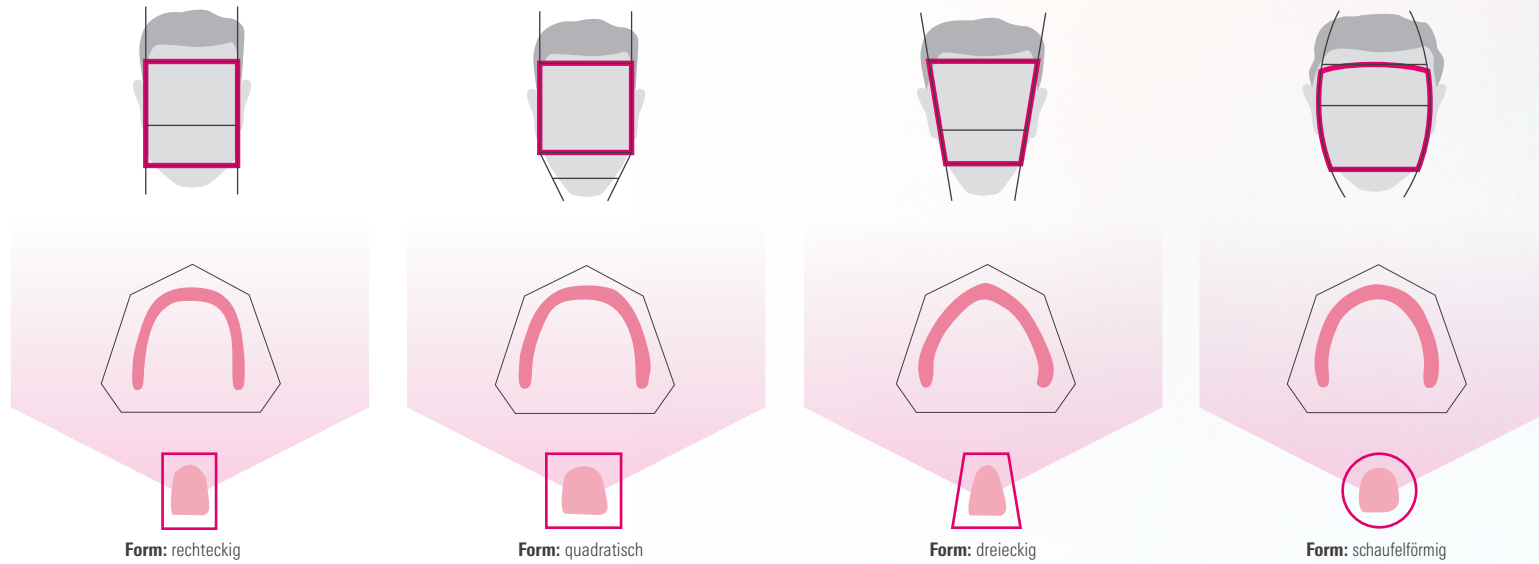


3. Ermitteln Sie die passende Zahnform

Die erforderliche Breite und Länge der Frontzähne werden über die Eckzahn- und Lachlinie bestimmt.

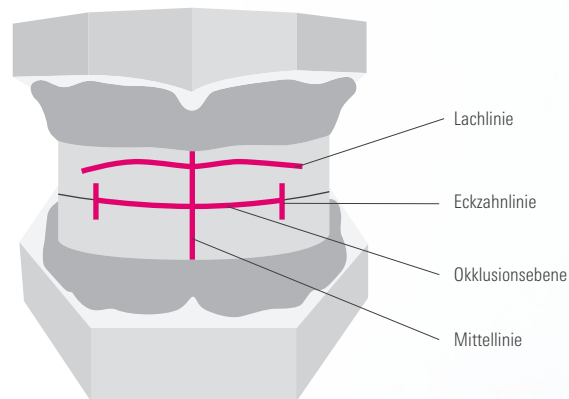

Lachlinie

Sie ist ausschlaggebend für die Länge der oberen Frontzähne, die Zahnhälse sollten oberhalb dieser Linie liegen.

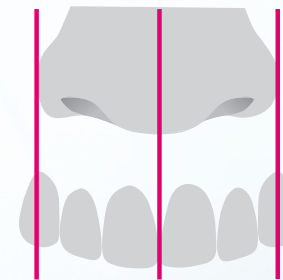

Eckzahnlinie


Sie ist maßgebend für die Breite der oberen Frontzähne. An ihrer Stelle soll die Spitze der oberen Eckzähne liegen.

Messpunkte: So werden die Zahnmaße bestimmt.*

> Anterior


Oberkiefer und Unterkiefer

Gesamtbreite der Garnitur

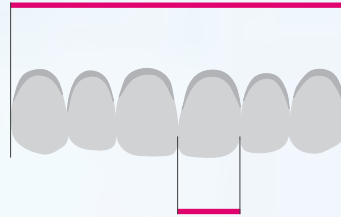

Zahnbreite

OK: FDI 21 (US 9)
UK: FDI 31 (US 24)

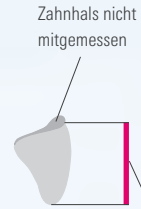

Zahnhals nicht mitgemessen

Zahnhöhe

Konventionelle
Prothesenzähne



Zahnhöhe

VITA VIONIC VIGO


> Posterior

Oberkiefer und Unterkiefer

Breite der halben Garnitur OK



Breite der halben Garnitur UK

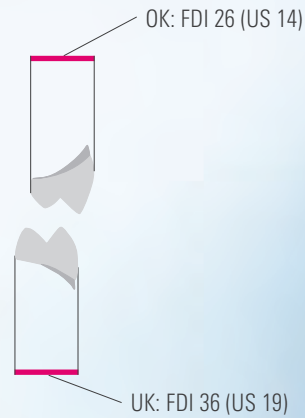

OK: FDI 26 (US 14)

UK: FDI 36 (US 19)

* Alle Angaben in mm

Alle VITA Zahnlinien mit Einführung ab 2007 wurden digital vermessen

Maximale Abweichung der Maße von Kunststoffzähnen +- 5 % lt. DIN ISO 22112:2017



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM








VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME







OK-Anterior




schaufelförmig

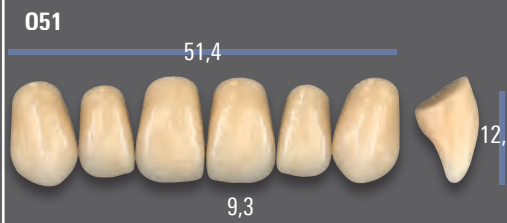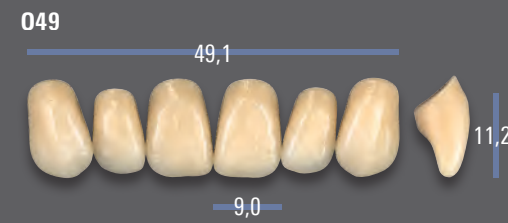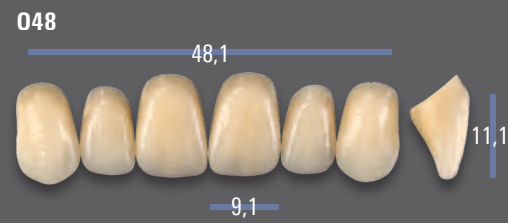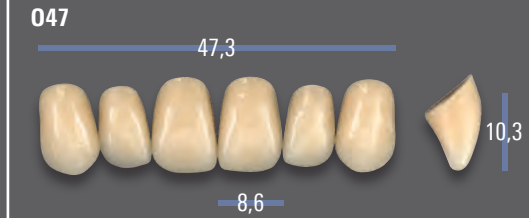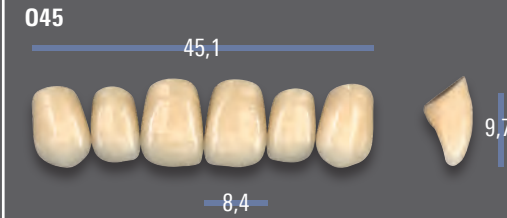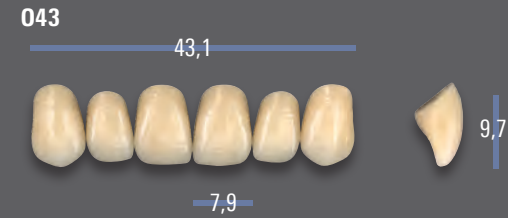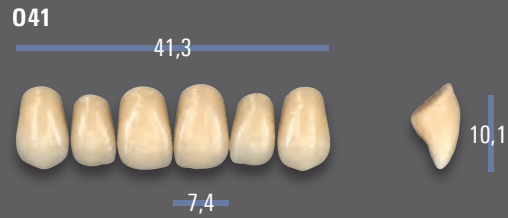

dreieckig

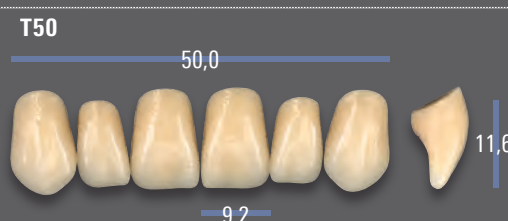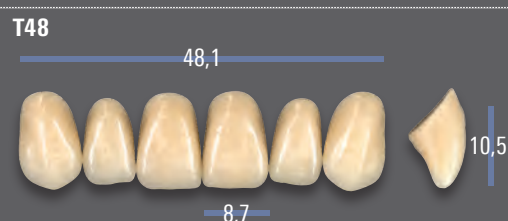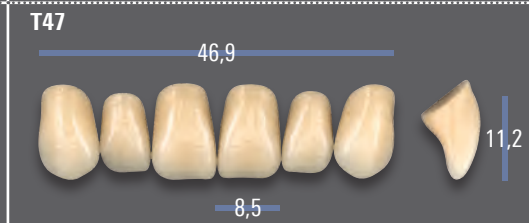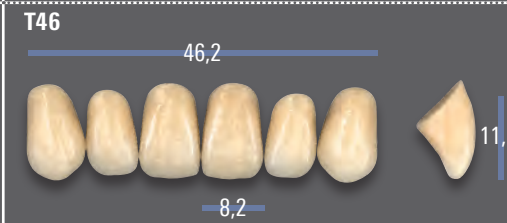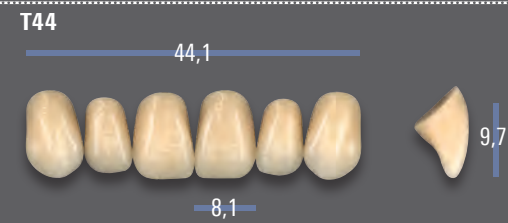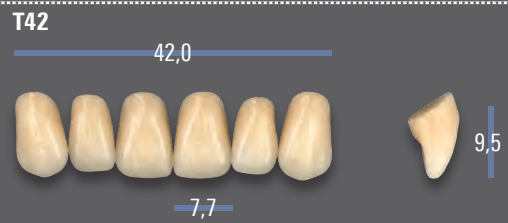


rechteckig

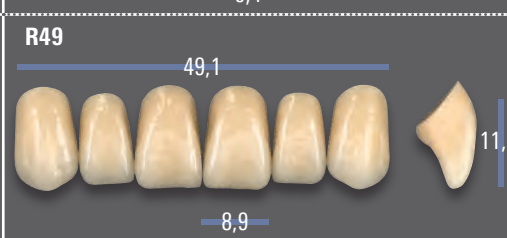





S46

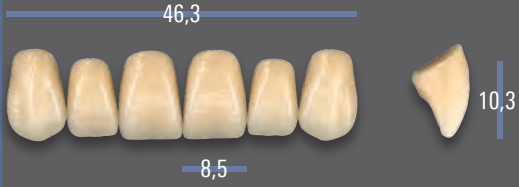

S48

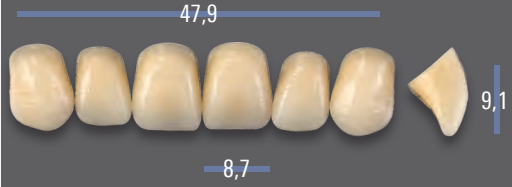


S52

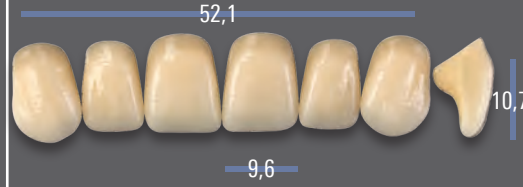


UK-Anterior


L33

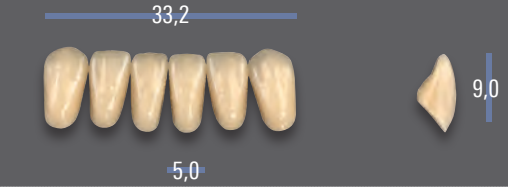


L35

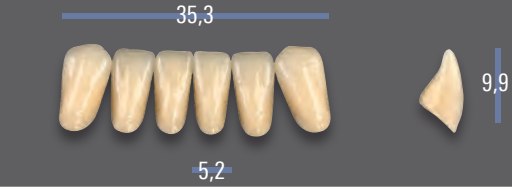


L37

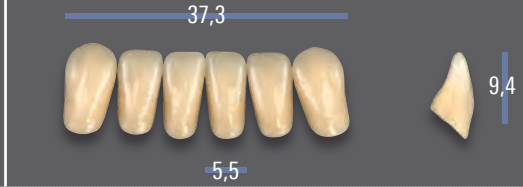

L37LC

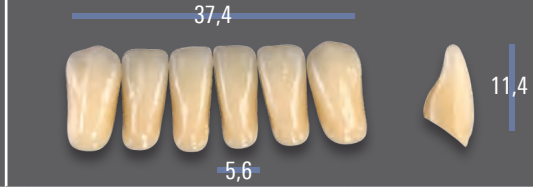

L39

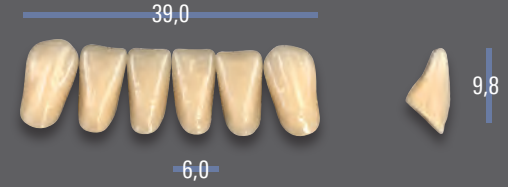









L41



► Hinweis: Für VITAPAN LINGOFORM Formen bitte passendes Register wählen

VITAPAN EXCELL®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VITAPAN EXCELL Anterior | OK/Nr.  mm | 041 41,3 | 043 43,1 | 045 45,1 | 047 47,3 | 048 48,1 | 049 49,1 | 051 51,4 | T42 42,0 | T44 44,1 | T46 46,2 | T47 46,9 | T48 48,1 | T50 50,0 | T51 51,4 | T54 54,4 |
| | UK/Nr.  mm | L33 33,2 | L33 33,2 | L35 35,3 | L37 37,3 | L37/L37LC 37,3/37,4 | L39 39,0 | L41 41,2 | L33 33,2 | L33 33,2 | L35 35,3 | L37 37,3 | L37 37,3 | L39 39,0 | L39 39,0 | L41 41,2 |
| VITAPAN LINGOFORM Posterior | OK/Nr.  mm | 21L 30,1 | 21L 30,1 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 23L 34,2 | 24L 35,8 | 21L 30,1 | 21L 30,1 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 24L 35,8 | 23L 34,2 | 24L 35,8 |
| | UK/Nr.  mm | 21L 30,7 | 21L 30,7 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 23L 34,8 | 24L 36,4 | 21L 30,7 | 21L 30,7 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 24L 36,4 | 23L 34,8 | 24L 36,4 |
| VITAPAN EXCELL Anterior | OK/Nr.  mm | R45 45,4 | R47 47,0 | R49 49,1 | S46 46,3 | S48 47,9 | S52 52,1 | | | | | | | | | |
| | UK/Nr.  mm | L35 35,3 | L37 37,3 | L39 39,0 | L35 35,3 | L37 37,3 | L41 41,2 | | | | | | | | | |
| VITAPAN LINGOFORM Posterior | OK/Nr.  mm | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 23L 34,2 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 23L 34,2 | | | | | | | | | |
| | UK/Nr.  mm | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 23L 34,8 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 23L 34,8 | | | | | | | | | |

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

► Hinweis: Für VITAPAN LINGOFORM Formen bitte passendes Register wählen



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN















VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

OK-Anterior

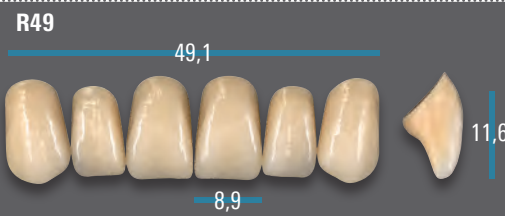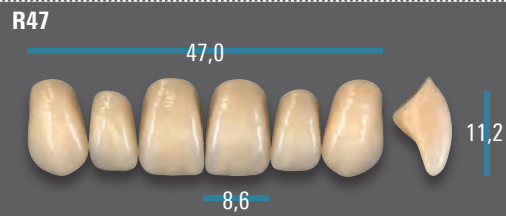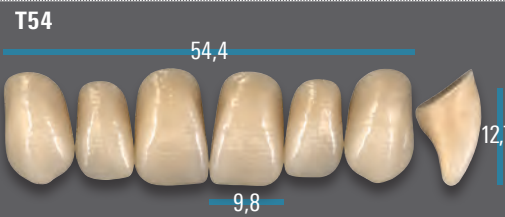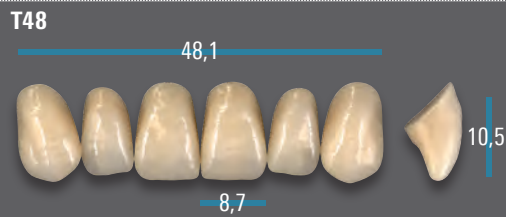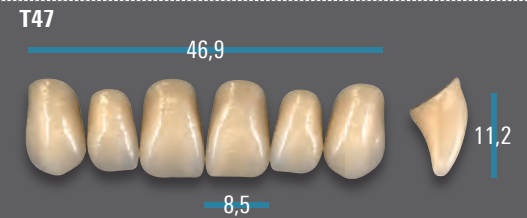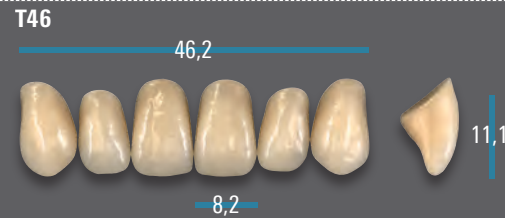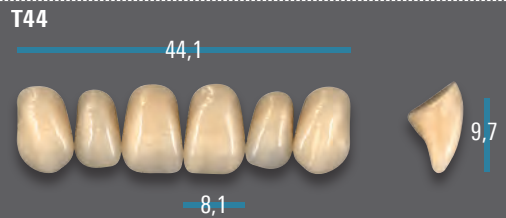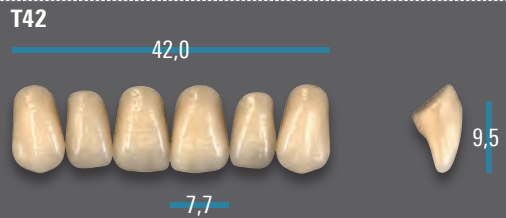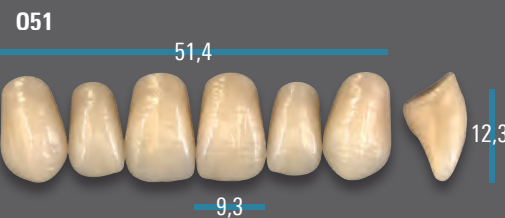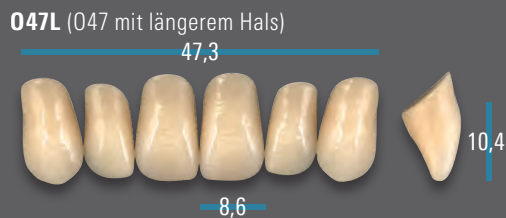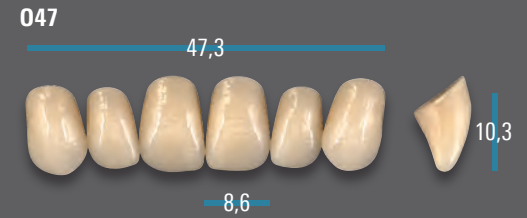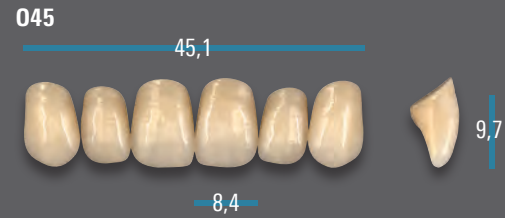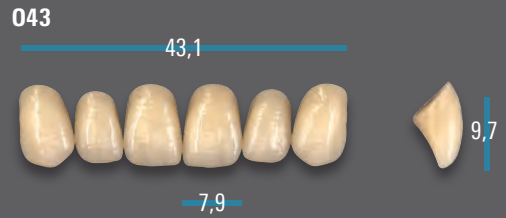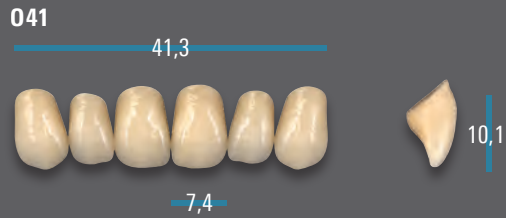

schaufel-
förmig




dreieckig



rechteckig




S46

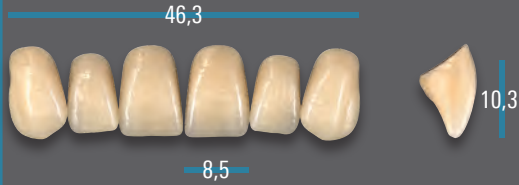


UK-Anterior


L33

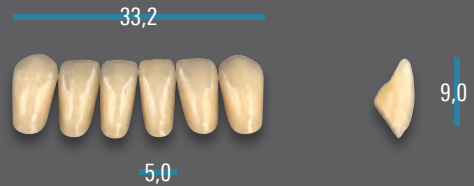


L35

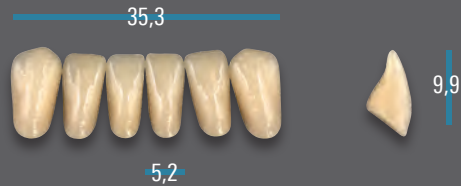


L37

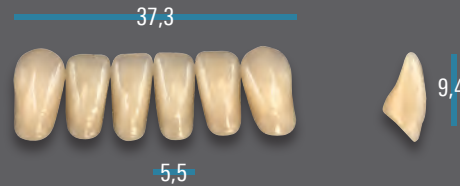

L37L* (L37 mit längerem Hals)

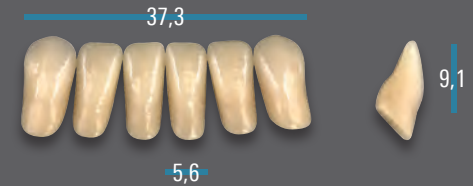

L39

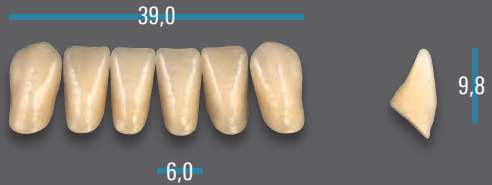

L41



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN PLUS Anterior | OK/Nr. mm | 041 41,3 | 043 43,1 | 045 45,1 | 047 47,3 | 047L* 47,3 | 049 49,1 | 051 51,4 | T42 42,0 | T44 44,1 | T46 46,2 | T47 46,9 | T48 48,1 | T50 50,0 | T54 54,4 | R45 45,4 | R47 47,0 | R49 49,1 | S46 46,3 |
| | UK/Nr. mm | L33 33,2 | L33 33,2 | L35 35,3 | L37 37,3 | L37L* 37,3 | L39 39,0 | L41 41,2 | L33 33,2 | L33 33,2 | L35 35,3 | L37 37,3 | L37 37,3 | L39 39,0 | L 41 41,2 | L35 35,3 | L37 37,3 | L39 39,0 | L35 35,3 |
| VITAPAN LINGOFORM Posterior | OK/Nr. mm | 21L 30,1 | 21L 30,1 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 23L 34,2 | 24L 35,8 | 21L 30,1 | 21L 30,1 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 24L 35,8 | 24L 35,8 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 23L 34,2 | 22L 31,6 |
| | UK/Nr. mm | 21L 30,7 | 21L 30,7 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 23L 34,8 | 24L 36,4 | 21L 30,7 | 21L 30,7 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 24L 36,4 | 24L 36,4 | 22L 32,1 | 22L 31,6 | 23L 34,8 | 22L 32,1 |

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können. *lang (047 bzw. L37 mit längerem Hals)

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO


VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN® LINGOFORM


Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

Posterior


21L*

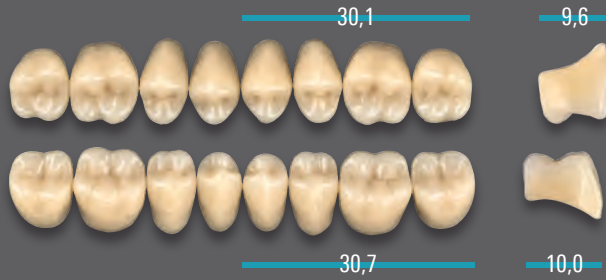


22L*

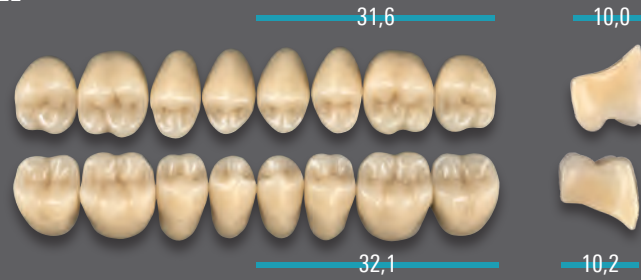

23L*

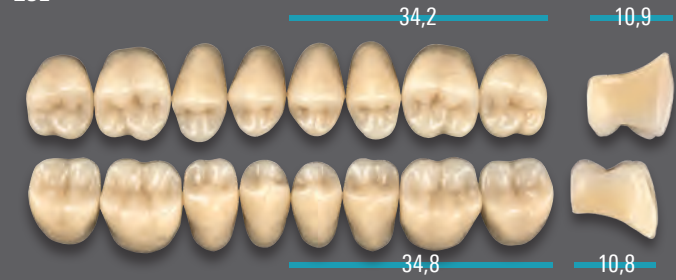

24L*

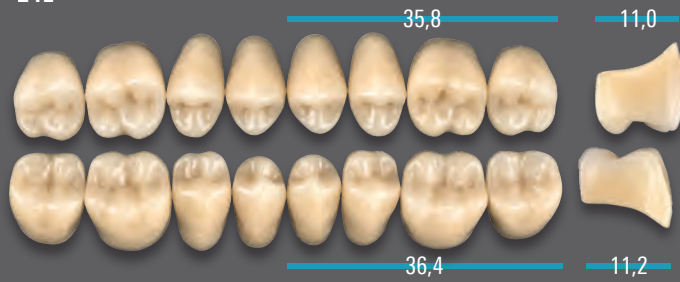

*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1–D4® Farben (ohne B1)

OK-Anterior

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>01S*</p> <p>42,3</p> <p>7,6</p> <p>10,8</p> | <p>02L</p> <p>45,7</p> <p>8,4</p> <p>11,5</p> | <p>03M</p> <p>47,2</p> <p>8,6</p> <p>10,8</p> | <p>04L</p> <p>49,2</p> <p>9,0</p> <p>12,7</p> |
| <p>05L</p> <p>50,1</p> <p>9,1</p> <p>11,4</p> | <p>06L</p> <p>51,3</p> <p>9,7</p> <p>13,1</p> | | |
| <p>T6S**</p> <p>41,0</p> <p>7,4</p> <p>10,4</p> | <p>T2S*</p> <p>44,9</p> <p>8,3</p> <p>10,1</p> | <p>T1S</p> <p>45,3</p> <p>8,7</p> <p>10,2</p> | <p>T3M</p> <p>45,6</p> <p>8,4</p> <p>11,7</p> |
| <p>T4M*</p> <p>45,6</p> <p>8,8</p> <p>11,3</p> | <p>T5M</p> <p>46,2</p> <p>8,8</p> <p>11,1</p> | <p>T6L</p> <p>47,3</p> <p>8,9</p> <p>12,4</p> | <p>T7M</p> <p>47,5</p> <p>8,8</p> <p>11,6</p> |
| <p>T8L*</p> <p>49,0</p> <p>9,2</p> <p>11,6</p> | <p>T9L</p> <p>49,6</p> <p>9,4</p> <p>13,1</p> | | |





rechteckig

X1M*

46,3




8,8



11,0

X2L

46,2

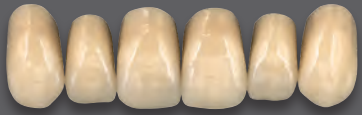

8,7



11,6

X3L

47,8



9,0



11,8



quadratisch

Z1S

44,1



8,1



9,8

Z2S

47,5



8,7



10,1

UK-Anterior

L1S*

33,0



4,9



8,8

L2M*

34,5



5,2



10,4

L3M*

36,3



5,2



10,5

L4M*

35,5



5,4



9,4

L5M*

37,0




5,5



10,4

L6L

38,2

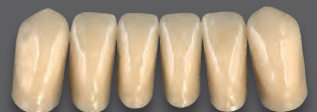


5,8



11,4

L7L

38,2

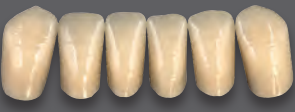


5,5



L8L

43,5

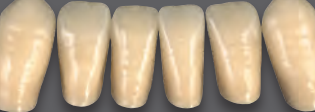

6,3



13,0

*) Bleached Farbe(n) 0M1 und 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

**) Form(en) nur in VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbe(n) erhältlich.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM









VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Erhältlich in 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1–D4® Farben (ohne B1)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VITA PHYSIODENS Anterior | OK/Nr.  mm | 01S 42,3 | 02L 45,7 | 03M 47,2 | 04L 49,2 | 05L 50,1 | 06L 51,3 | T6S 41,0 | T2S 44,9 | T1S 45,3 | T3M 45,6 | T4M 45,6 | T5M 46,2 | T6L 47,3 | T7M 47,5 | T8L 49,0 | T9L 49,6 |
| | UK/Nr.  mm | L1S 33,0 | L2M 34,5 | L3M 36,3 | L6L 38,2 | L6L 38,2 | L8L 43,5 | L1S 33,0 | L2M 34,5 | L1S 33,0 | L3M 36,3 | L4M 35,5 | L3M 36,3 | L5M 37,0 | L7L 38,2 | L5M 37,0 | L6L 38,2 |
| VITA PHYSIODENS Posterior | OK/Nr.  mm | 21E 30,5 | 22E 32,9 | 23E 33,5 | 24E 34,8 | 24E 34,8 | 25E 36,7 | 21E 30,5 | 21E 30,5 | 20E 29,4 | 22E 32,9 | 22E 32,9 | 23E 33,5 | 23E 33,5 | 23E 33,5 | 24E 34,8 | 25E 36,7 |
| | UK/Nr.  mm | 21E 32,7 | 22E 33,7 | 23E 34,6 | 24E 36,1 | 24E 36,1 | 25E 37,3 | 21E 32,7 | 21E 32,7 | 20E 31,0 | 22E 33,7 | 22E 33,7 | 23E 34,6 | 23E 34,6 | 23E 34,6 | 24E 36,1 | 25E 37,3 |
| VITA PHYSIODENS Anterior | OK/Nr.  mm | X1M 46,3 | X2L 46,2 | X3L 47,8 | Z1S 44,1 | Z2S 47,5 | | | | | | | | | | | |
| | UK/Nr.  mm | L3M 36,3 | L4M 35,5 | L5M 37,0 | L1S 33,0 | L5M 37,0 | | | | | | | | | | | |
| VITA PHYSIODENS Posterior | OK/Nr.  mm | 23E 33,5 | 23E 33,5 | 24E 34,8 | 21E 30,5 | 22E 32,9 | | | | | | | | | | | |
| | UK/Nr.  mm | 23E 34,6 | 23E 34,6 | 24E 36,1 | 21E 32,7 | 22E 33,7 | | | | | | | | | | | |

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

VITA PHYSIODENS®


















Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

Posterior

| | | |
|---|---|--|
| <p>20E</p> <p>29,4 8,9</p> <p>31,0 8,3</p> | <p>21E*</p> <p>30,5 9,5</p> <p>32,7 8,7</p> | <p>22E*</p> <p>32,9 9,5</p> <p>33,7 9,0</p> |
| <p>23E*</p> <p>33,5 11,1</p> <p>34,6 9,8</p> | <p>24E*</p> <p>34,8 11,8</p> <p>36,1 9,8</p> | <p>25E</p> <p>36,7 11,2</p> <p>37,3 9,5</p> |

*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

OK-Anterior

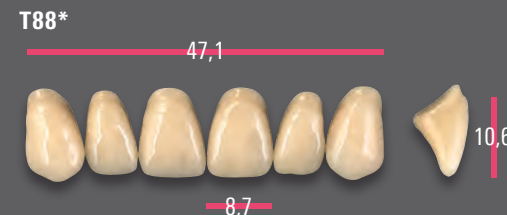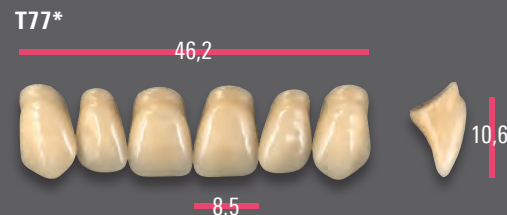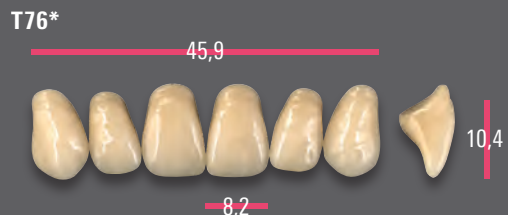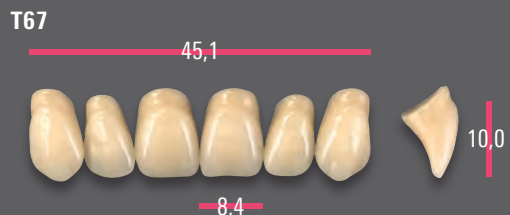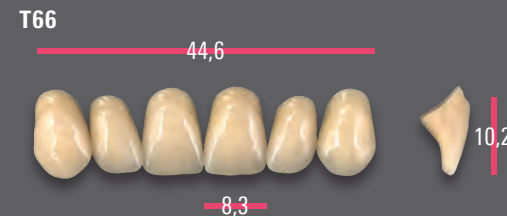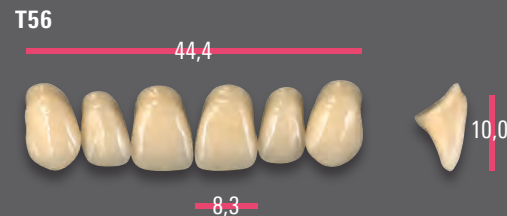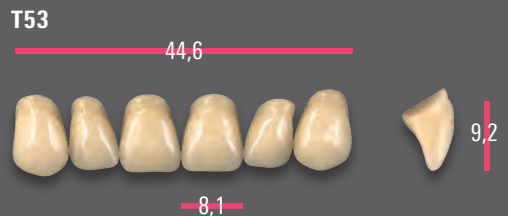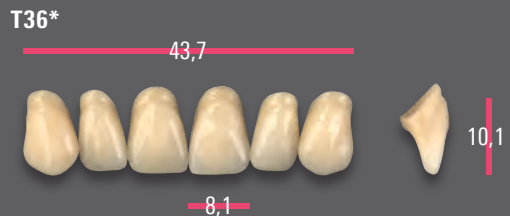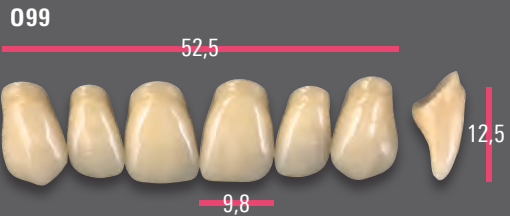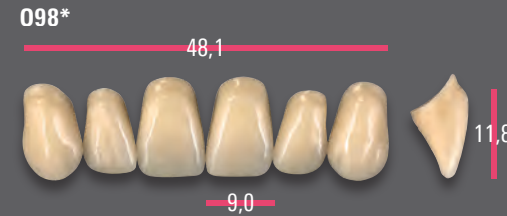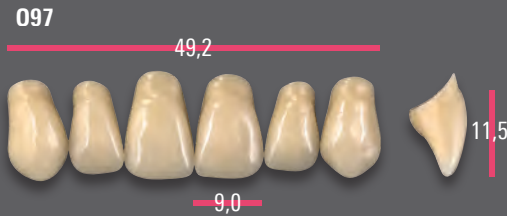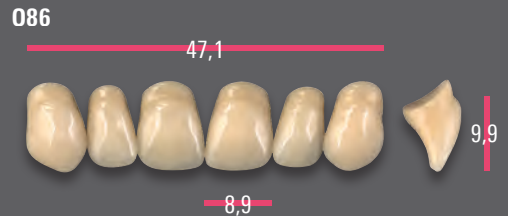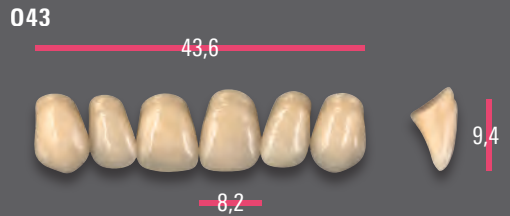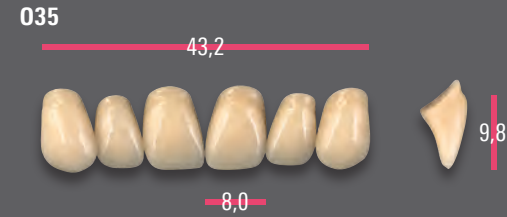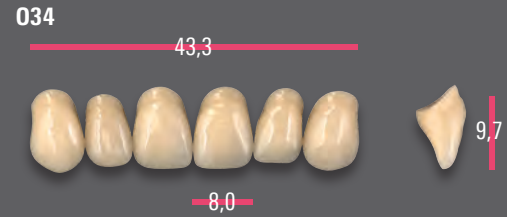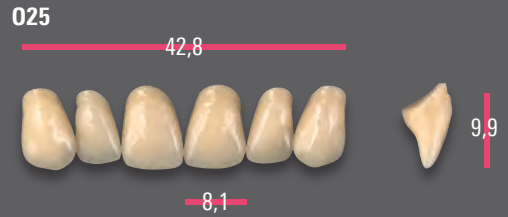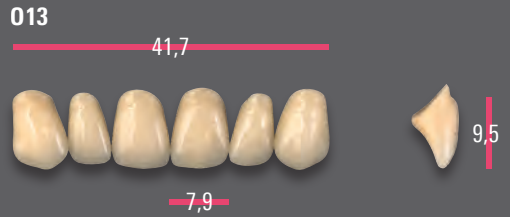


schaufel-
förmig




dreieckig


T98

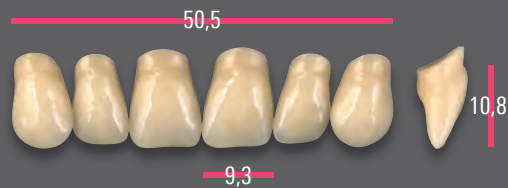


T99

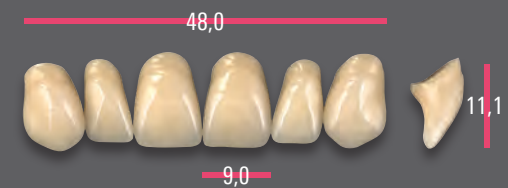


X13

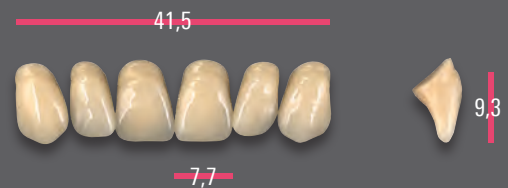


X66

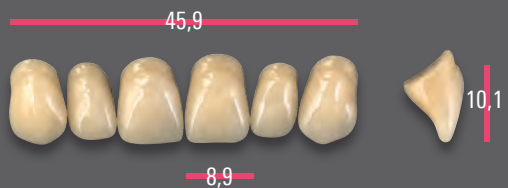

X77

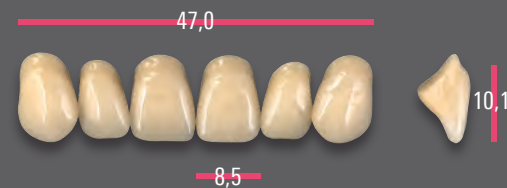


X87

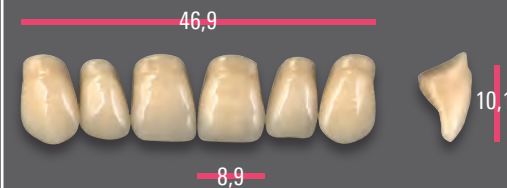


rechteckig


X96

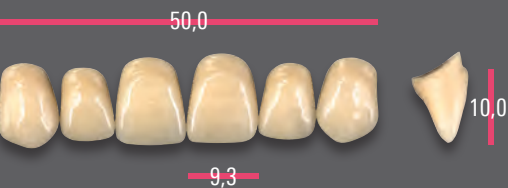


X99

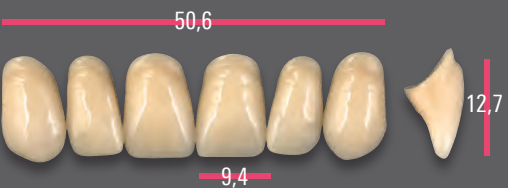


Z51

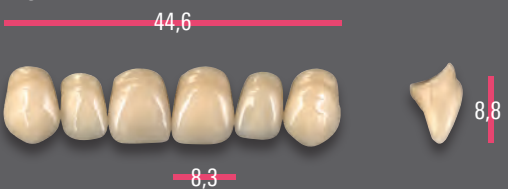


Z61

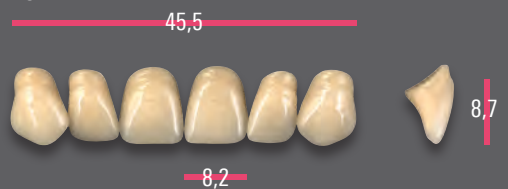

Z74

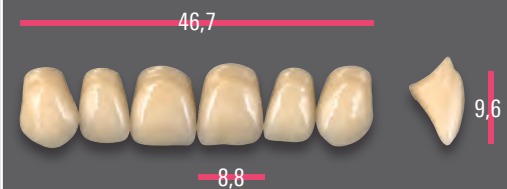


Z84

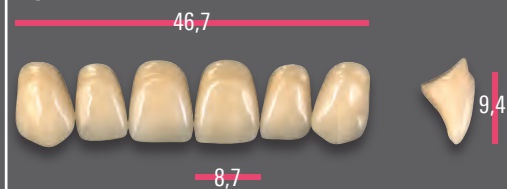


quadratisch

Z85








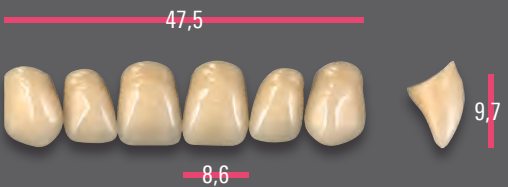


Z97





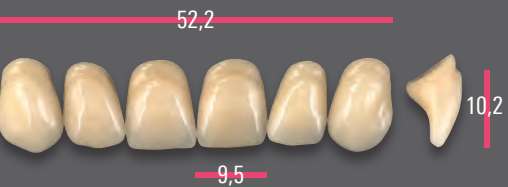


UK-Anterior

Voll ausgebildete Schneidekanten

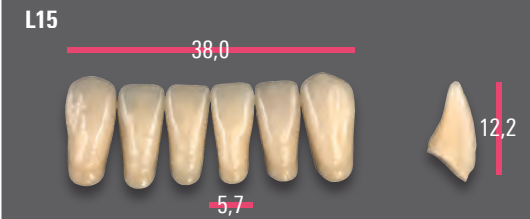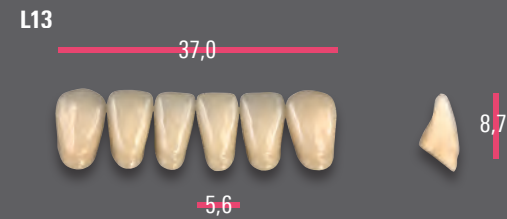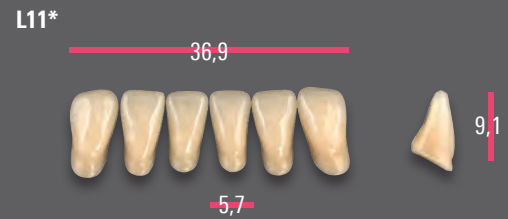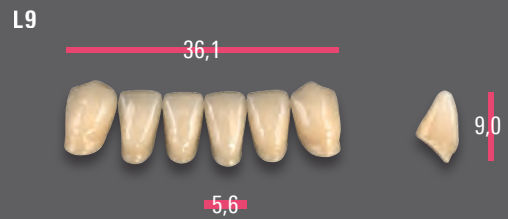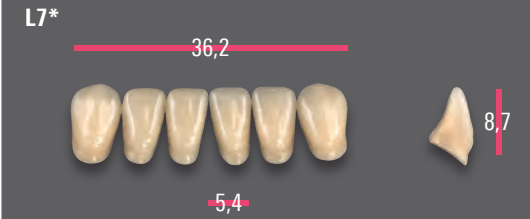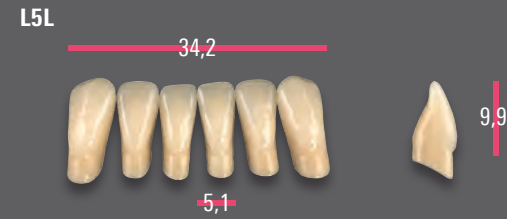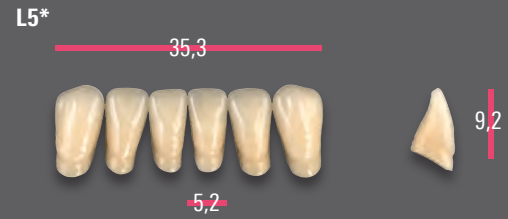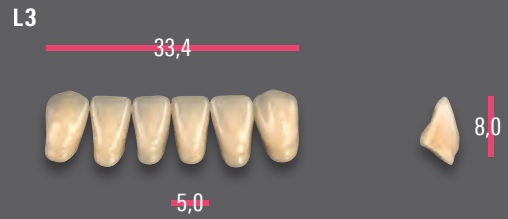



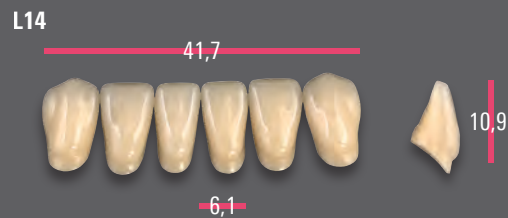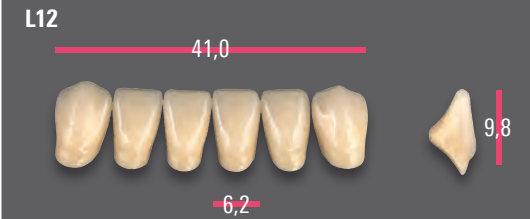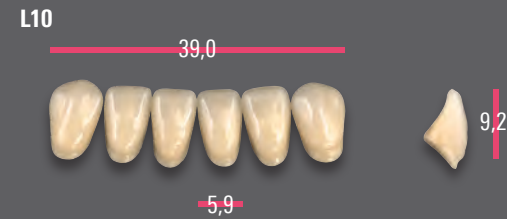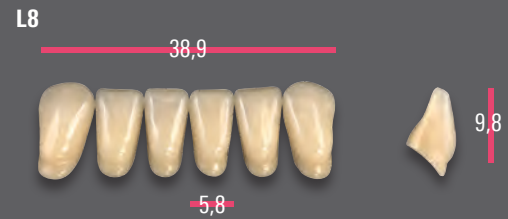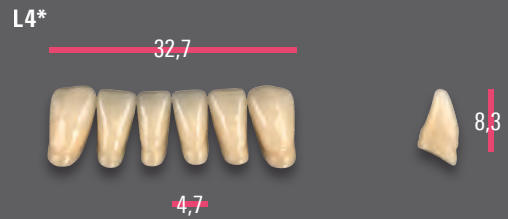



Abradierte Schneidekanten



*) Bleached Farbe(n) 0M1 und 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VITAPAN Anterior | OK/Nr.  mm | 013 41,7 | 025 42,8 | 034 43,3 | 035 43,2 | 043 43,6 | 086 47,1 | 097 49,2 | 098 48,1 | 099 52,5 | T36 43,7 | T53 44,6 | T56 44,4 | T66 44,6 | T67 45,1 | T76 45,9 | T77 46,2 | T88 47,1 | T98 50,5 | T99 48,0 |
| | UK/Nr.  mm | L4 32,7 | L3 33,4 | L3 33,4 | L3 33,4 | L5 35,3 | L11 36,9 | L8 38,9 | L13 37,0 | L14 41,7 | L4 32,7 | L5 35,3 | L5 35,3 | L5 35,3 | L4 32,7 | L7 36,2 | L11 36,9 | L11 36,9 | L15 38,0 | L11 36,9 |
| VITAPAN CUSPIFORM Posterior | OK/Nr.  mm | 40C 28,1 | 40C 28,1 | 41C 29,9 | 41C 29,9 | 41C 29,9 | 42C 31,7 | 44C 32,8 | 42C 31,7 | 45C 34,8 | 40C 28,1 | 41C 29,9 | 41C 29,9 | 42C 31,7 | 42C 31,7 | 42C 31,7 | 42C 31,7 | 44C 32,8 | 45C 34,8 | 44C 32,8 |
| | UK/Nr.  mm | 40C 29,5 | 40C 29,5 | 41C 31,3 | 41C 31,3 | 41C 31,3 | 42C 33,4 | 44C 34,6 | 42C 33,4 | 45C 36,3 | 40C 29,5 | 41C 31,3 | 41C 31,3 | 42C 33,4 | 42C 33,4 | 42C 33,4 | 42C 33,4 | 44C 34,6 | 45C 36,3 | 44C 34,6 |
| VITAPAN SYNOFORM Posterior | OK/Nr.  mm | 10S 29,0 | 10S 29,0 | 11S 30,0 | 11S 30,0 | 11S 30,0 | 12S 31,3 | 14S 33,1 | 12S 31,3 | 14S 33,1 | 10S 29,0 | 11S 30,0 | 11S 30,0 | 12S 31,3 | 12S 31,3 | 12S 31,3 | 12S 31,3 | 14S 33,1 | 14S 33,1 | 14S 33,1 |
| | UK/Nr.  mm | 10S 30,5 | 10S 30,5 | 11S 31,9 | 11S 31,9 | 11S 31,9 | 12S 32,7 | 14S 35,4 | 12S 32,7 | 14S 35,4 | 10S 30,5 | 11S 31,9 | 11S 31,9 | 12S 32,7 | 12S 32,7 | 12S 32,7 | 12S 32,7 | 14S 35,4 | 14S 35,4 | 14S 35,4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VITAPAN Anterior | OK/Nr.  mm | X13 41,5 | X66 45,9 | X77 47,0 | X87 46,9 | X96 50,0 | X99 50,6 | Z51 44,6 | Z61 45,5 | Z74 46,7 | Z84 46,7 | Z85 47,5 | Z97 52,2 |
| | UK/Nr.  mm | L4 32,7 | L9 36,1 | L11 36,9 | L11 36,9 | L10 39,0 | L15 38,0 | L3 33,4 | L3 33,4 | L9 36,1 | L9 36,1 | L13 37,0 | L12 41,0 |
| VITAPAN CUSPIFORM Posterior | OK/Nr.  mm | 41C 29,9 | 42C 31,7 | 42C 31,7 | 44C 32,8 | 44C 32,8 | 45C 34,8 | 43C 31,0 | 43C 31,0 | 42C 31,7 | 42C 31,7 | 44C 32,8 | 45C 34,8 |
| | UK/Nr.  mm | 41C 31,3 | 42C 33,4 | 42C 33,4 | 44C 34,6 | 44C 34,6 | 45C 36,3 | 43C 32,3 | 43C 32,3 | 42C 33,4 | 42C 33,4 | 44C 34,6 | 45C 36,3 |
| VITAPAN SYNOFORM Posterior | OK/Nr.  mm | 11S 30,0 | 12S 31,3 | 12S 31,3 | 14S 33,1 | 14S 33,1 | 14S 33,1 | 13S 31,3 | 13S 31,3 | 12S 31,3 | 12S 31,3 | 14S 33,1 | 14S 33,1 |
| | UK/Nr.  mm | 11S 31,9 | 12S 32,7 | 12S 32,7 | 14S 35,4 | 14S 35,4 | 14S 35,4 | 13S 33,9 | 13S 33,9 | 12S 32,7 | 12S 32,7 | 14S 35,4 | 14S 35,4 |

Die Angaben in der Kombinationstabelle sind allgemeine unverbindliche Orientierungswerte, die sich je nach individueller Situation des Patienten ändern können.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN® CUSPIFORM

Erhältlich in 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben (0M3, 1M1 – 5M3) und 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

Posterior

| | | |
|--|---|---|
| 40C 28,1 7,8 29,5 7,6 | 41C* 29,9 8,4 31,3 8,0 | 42C* 31,7 8,3 33,4 8,0 |
| 43C 31,0 8,5 32,3 8,1 | 44C* 32,8 9,1 34,6 8,7 | 45C 34,8 9,4 36,3 8,6 |


*) Bleached Farbe 0M3 exklusiv für ausgewählte Form(en) erhältlich.

VITAPAN SYNOFORM®


Erhältlich in 15 x VITA classical A1 – D4® Farben (ohne B1)

Posterior

10S

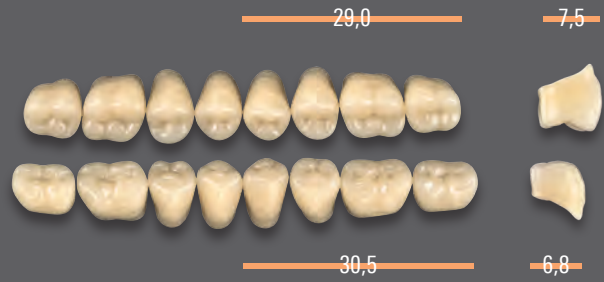


11S

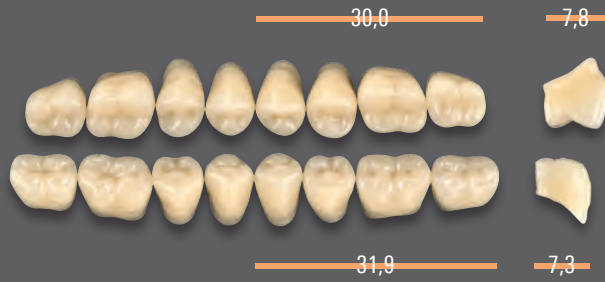


12S



13S

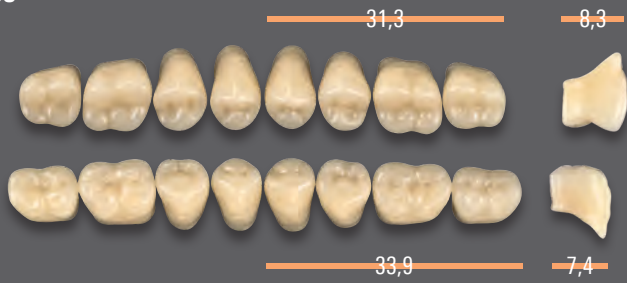

14S

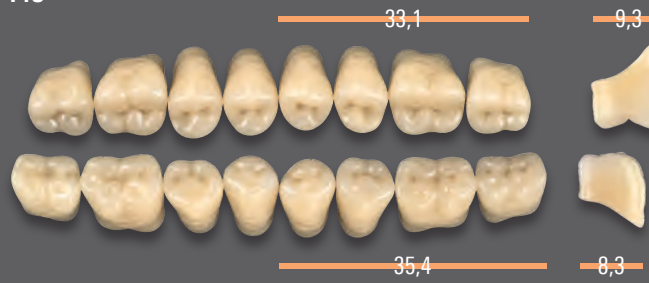

OK-Anterior

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  <p>schaufelförmig</p> | <p>O43</p> <p>43,3</p>  <p>7,9</p> <p>10,7</p> | <p>O45</p> <p>44,8</p>  <p>8,3</p> <p>11,3</p> | | |
|  <p>dreieckig</p> | <p>T44</p> <p>44,0</p>  <p>8,1</p> <p>11,7</p> | <p>T46</p> <p>46,2</p>  <p>8,2</p> <p>11,6</p> | <p>T48</p> <p>48,3</p>  <p>8,7</p> <p>12,5</p> | <p>T50</p> <p>49,9</p>  <p>9,2</p> <p>12,9</p> |
|  <p>rechteckig</p> | <p>R47</p> <p>47,0</p>  <p>8,6</p> <p>10,7</p> | <p>R49</p> <p>49,0</p>  <p>8,9</p> <p>12,1</p> | | |

UK-Anterior

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>L33</p> <p>33,2</p>  <p>4,9</p> <p>8,9</p> | <p>L35</p> <p>35,2</p>  <p>5,2</p> <p>9,5</p> | <p>L37</p> <p>37,2</p>  <p>5,5</p> <p>10,0</p> | <p>L39</p> <p>39,2</p>  <p>5,8</p> <p>10,5</p> |
|---|--|--|--|

► **Hinweis:** Der VITA VIONIC VIGO Konfektionszahn ist ein Produkt, welches speziell für digitale Produktionsprozesse entwickelt wurde. Die Zähne sind zervikal gekürzt und die Kontaktflächen zur Prothesenbasis für die Verklebung vorkonditioniert. So können die gebrauchsfertigen Zähne direkt aus der Verpackung in die Kavitäten der digital hergestellten Prothesenbasis eingeklebt werden.

VITA VIONIC VIGO®

Erhältlich in 7 x VITA classical A1–D4®-/Bleach-Farben: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Posterior



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITA VIONIC VIGO Anterior | OK/Nr. mm | R47 47,0 | R49 49,0 | O45 44,8 | T50 49,9 | T46 46,2 | O43 43,3 | T44 44,0 | T48 48,3 |
| | UK/Nr. mm | L37 37,2 | L39 39,2 | L35 35,2 | L39 39,2 | L35 35,2 | L33 33,2 | L33 33,2 | L37 37,2 |
| VITA VIONIC VIGO Posterior | OK/Nr. mm | 22L 31,8 | 23L 34,3 | 22L 31,8 | 24L 35,9 | 22L 31,8 | 21L 30,3 | 21L 30,3 | 22L 31,8 |
| | UK/Nr. mm | 22L 32,6 | 23L 35,0 | 22L 32,6 | 24L 36,9 | 22L 32,6 | 21L 31,0 | 21L 31,0 | 22L 32,6 |

> **Hinweis:** Der VITA VIONIC VIGO Konfektionszahn ist ein Produkt, welches speziell für digitale Produktionsprozesse entwickelt wurde. Die Zähne sind zervikal gekürzt und die Kontaktflächen zur Prothesenbasis für die Verklebung vorkonditioniert. So können die gebrauchsfertigen Zähne direkt aus der Verpackung in die Kavitäten der digital hergestellten Prothesenbasis eingeklebt werden.

VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Erhältlich in 6 x VITA classical A1–D4® Farben (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

OK-Anterior

043

43,1



9,7

7,9

045

45,1



9,7

8,4

049

49,1



11,2

9,0

T44

44,1



9,7

8,1

T46

46,2



11,1

8,2

T48

48,1



10,5

8,7

T50

50,0



11,6

9,2

R45

45,4



9,9

8,2

R47

47,0



11,2

8,6



schaufel-
förmig



dreieckig



rechteckig

UK-Anterior

L33

33,2



9,0

5,0

L35

35,3



9,9

5,2

L37

37,3



9,4

5,5

L39

39,0



9,8

6,0

VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME


Erhältlich in 6 x VITA classical A1–D4® Farben (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Posterior



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VITAPAN EXCELL Anterior | OK/Nr. mm | 043 43,1 | 045 45,1 | 049 49,1 | T44 44,1 | T46 46,2 | T48 48,1 | T50 50,0 | R45 45,4 | R47 47,0 |
| | UK/Nr. mm | L33 33,2 | L35 35,3 | L39 39,0 | L33 33,2 | L35 35,3 | L37 37,3 | L39 39,0 | L35 35,3 | L37 37,3 |
| VITAPAN LINGOFORM Posterior | OK/Nr. mm | 21L 30,1 | 22L 31,6 | 23L 34,2 | 21L 30,1 | 22L 31,6 | 22L 31,6 | 24L 35,8 | 22L 31,6 | 22L 31,6 |
| | UK/Nr. mm | 21L 30,7 | 22L 32,1 | 23L 34,8 | 21L 30,7 | 22L 32,1 | 22L 32,1 | 24L 36,4 | 22L 32,1 | 22L 32,1 |

Weitere Informationen zu den **VITA PROTHETIK LÖSUNGEN** finden Sie unter:
www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

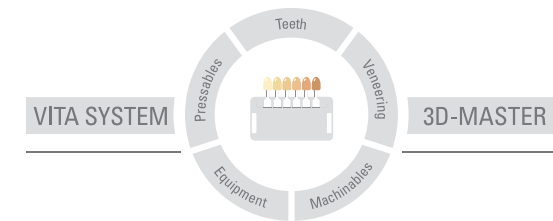

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2022-07

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung

CE 0124

VITAPAN® Produktfamilie, **VITA PHYSIODENS®**, **VITA VIONIC®** Produktfamilie

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik